

BRUKSANVISNING

Ridstol Leo



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVSEDD ANVÄNDNING	3
VARNING OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER	3
INSTÄLLNING FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	5
ANVÄND MED BAS	6
INSTÄLLNINGAR UNDER ANVÄNDNING	7
MÖJLIGA TILLBEHÖR.....	7
DIMENSIONER OCH VIKT	8
VANLIGA KONTROLLER.....	9
RENGÖRING OCH SKÖTSEL	9
MATERIAL	9
TILLVERKARE OCH KVALITET	10

Viktig:

Läs dessa instruktioner noggrant före användning för att undvika faror under användning och för att säkerställa barnets säkerhet, följ dessa instruktioner noggrant.



AVSEDD ANVÄNDNING

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och för korrekt användning som möbel och sittplats. Produkten får under inga omständigheter användas på cykel, i cykelvagn, i bil eller i andra liknande transportlösningar.
- Den åldersanpassade storleksrekommendationen och stolens maximala lastkapacitet anges på sidan 8 i respektive storlekstabell.
- Basramen för ridstolen är anpassad efter sitsens form och storlek och får inte användas tillsammans med andra sitsar eller stolar.

VARNING OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Bruksanvisningen är en integrerad del av rehabiliteringsstolen. Förvara dokumentationen och överlämna den vid eventuell vidareöverlåtelse av produkten. Vid förlust kan en kopia laddas ner från vår hemsida:

www.pappa-bjoern.se

- Produkten är inte avsedd som klätter- eller lekutrustning och är inte lämplig som stöyta eller stege. Den kan tippa eller välta. Se till att stolen används under uppsikt.
- Använd produkten på ett fast, plant och torrt underlag. Eventuella hjul är endast avsedda för släta och rena golv.
- Undvik att stolen välter eller faller, eftersom detta kan påverka konstruktion och stabilitet.
- Om stöd och abduktionskil är fastmonterade får barnet aldrig tvingas in i sitsen. Detta kan orsaka skador på både barnet och produkten. Vid sådan felanvändning kan produktens säkerhet, ansvar och garanti inte längre garanteras.
- Gör alla grundinställningar INNAN barnet sätter sig i stolen. Inställningarna ska göras noggrant, på ett sätt som är bekvämt för barnet men samtidigt säkert. Barnet får under inga omständigheter begränsas av stöd eller abduktionskil.
- Använd endast de bältessystem (tillbehör) som vi tillhandahåller för denna produkt. Observera att barnet utan bälte kan tippa framåt och ramla. Barnet ska därför alltid vara säkrat. Det är därför nödvändigt att säkra barnet hela tiden.




- Tänk på att höjden på sitsen är fixerad med skruvarna fram och bak och är bara stabil på detta sätt. Se till att sätet är horisontellt inriktat med hjälp av etiketten (exempel: fäst skruvförbandet framtill i hål #1 och baktill i hål #1).
- Se till att barnet aldrig lämnas utan uppsikt under användning och att en ansvarig vuxen alltid är närvarande.
- Vid användning med basram måste alla 4-hjulsbromsar vara inkopplade för att förhindra oavsiktlig rullning.
- Fäst inga komponenter från andra företag på denna rehabiliteringsstolen och anpassa endast basramen som tillhandahålls för detta ändamål. Observera att stolen används som barnstol när den monteras på basram och att barnet därför alltid ska vara säkrat.
- Skyddsanordningar och etiketter får inte tas bort. Rehabiliteringsstolen med basram är CE-testad och märkt.
- Håll denna produkt borta från öppen eld, cigaretter och värmekällor såsom eldstäder, radiatorer och värmare. Förvara rehabiliteringsstolen i rumstemperatur och i ett torrt rum.
- Se till att stolen är i gott skick innan den används. Om du upptäcker några defekter i produkterna under användning, vänligen ta ut barnet ur sätet omedelbart och använd det inte igen förrän defekterna har åtgärdats på ett fackmannamässigt sätt.

Att avvika från säkerhetsanvisningarna upphäver inte bara garantin utan äventyrar säkerheten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av sådan felanvändning. Reparationer bör utföras av auktoriserade specialister.



INSTÄLLNING FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

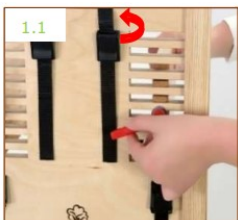

1. Lossa de två klämspackarna på baksidan av ryggplattan (moturs) och för pelotterna till ett brett utgångsläge (se figur 1.2). Flytta abduktionskilen till det främre läget genom att lossa skruven under sitsen och föra kilen

framåt.

Vid användning av plug-in-systemet för pelotter ska du säkerställa att dessa är fixerade i 90° vinkel. Annars kan glipor uppstå och träförbanden skadas.



2. För abduktionskilen i rätt läge genom att lossa spaken och föra kilen framåt. Dra därefter åt skruv och bricka för hand för att fixera kilen igen.

3. Placera barnet på sitsen och säkra det med 4-punktsbröstbältet. Vid behov kan en andra person hjälpa till att hålla barnet stabilt under inställningen.



Utan bälte kan barnet ramla ur stolen.

Placera därefter pelotter och abduktionskil i rätt position och fixera dem genom att dra åt skruvarna för hand (medsols).

4. Mät och justera därefter bockhöjden. För detta ska de två skruvarna framtill och baktill tas bort och återmonteras i önskad inställning. Samma höjd ska alltid användas framtill och baktill.

5. Vid användning av basram ska denna anslutas till ridstolen innan barnet sätter sig.

Viktigt:

Fråga en terapeut om korrekt justering av rehabiliteringsstolen om du inte själv är expert.



ANVÄND MED BAS

Obs: Anslut basramen till stolen innan barnet sätter sig. Barnets benlängd avgör sitthöjden, medan utrymmet under bordet avgör höjden på basramen:

1. Lås alla fyra hjul på basramen genom att aktivera respektive bromsspak så att hjulen är helt fixerade.

2. Ha därefter de två skruvarna med tillhörande brickor redo.

3. Placera stolen på basramen och justera den tills kopplingsdelarna glider in i varandra.


4. Placera skruven med bricka framtill och fäst stolen i basramen framtill.

5. Fäst anslutningsfästet med en skruv i stolen och en skruv i basramen. Se till att skruvarna förs rakt in i hylsorna och att gängen greppar korrekt. Vid behov kan bocken stödjas lätt för att hitta rätt position.

6. Det finns markeringar bredvid höjdställningarna. Dessa används som hjälp vid justering och ska alltid vara identiska framtill och baktill.

Obs: På baksidan är höjdställningen av stativ och anslutningsfäste fixerade med samma skruv.

7. Basramens höjd kan justeras genom att ta bort eller montera en del av ramen. Ju högre barnets överkropp är, desto lägre bör basramen ställas in. För att justera höjden, lossa skruven på ramen, ta bort ramen och skruva därefter tillbaka anslutningsfästet. För att separera stolen från basramen utförs stegen i omvänd ordning.

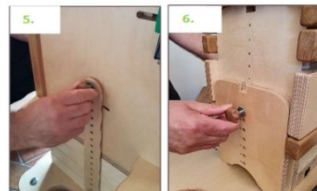



INSTÄLLNINGAR UNDER ANVÄNDNING

- Pelotternas bredd och höjd kan justeras under användning. Ändra dock endast en inställning i taget och se till att barnet alltid är säkrat med bälte. Vid behov kan en andra person hjälpa till att hålla barnet stabilt under justeringen.
- Utför alltid en avslutande säkerhetskontroll för att säkerställa att pelotter, fotbrädor, abduktionskil och – om tillämpligt – bälte är korrekt justerade och att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Lämna aldrig barnet i sätet utan uppsikt under hela användningstiden.

Viktigt:

Om barnet visar tecken på rädsla, gråt, kraftig oro eller om huvudets stabilitet är otillräcklig och det finns risk för skada eller fall, ska barnet omedelbart tas ur stolen.

MÖJLIGA TILLBEHÖR

- Säte, abduktionskil
- 4-punkts bröstbälte, höftbälte, sittbyxor (olika storlekar)
- Halkskyddsmatta 4,5 mm (grön) – 10 mm för sits
- Styre
- Nackkudde (skum)
- Färgad spännspek
- Anpassningsbar basram

DIMENSIONER OCH VIKT

Tekniska data	storlek 2	storlek 3	storlek 4
Rekommenderad ålder (ca)	4 - 7 år	7 - 10 år	från 10 år
Underbenshöjd (baksida av knä till hääl) = sitthöjd	25 - 37 cm	34 - 51 cm	39 - 55 cm
Ramens bredd	23 cm	25,5 cm	30 cm
Bockens djup	45 cm	50 cm	56 cm
Möjligt pelottemellanrum (bredd)	15 - 28,5 cm	18 - 30 cm	20,5 - 33,5 cm
Antal pelotteöppningar	14 stycken	20 stycken	21 stycken
Pelotter (L/B/H)	19,5 x 14 x 2,5 cm		
Bottenplatta (W/L)	50 x 63 cm	57 x 68 cm	63 x 81 cm
Total höjd på ryggplattan	69 cm	87 cm	100 cm
Ryggstödet höjd (från ramens lägsta inställning)	32–44 cm	36–53 cm	45–61 cm
Kil (L/B/H)	10x7,5x7,5cm	12x8,5x9cm	12x10x10cm
Vikt	18 kg	22,9 kg	29 kg
Maximal tillåten kroppsvikt	40 kg	60 kg	90 kg
Minsta höjd till bordets underkant (benutrymme)	46 cm	66 cm	66 cm
Minsta höjd till bordets underkant inklusive underrede	65 cm	66 cm	66 cm

Varje sits och bas är unik och designad samt handgjord av oss. Därför kan färg, material och mindre dimensionella avvikelser vara möjliga.



VANLIGA KONTROLLER

- Innan stolen används ska du kontrollera att alla delar finns på plats, är korrekt monterade och att allt material är i gott skick.
- Samtliga skruvar och brickor ska alltid vara ordentligt åtdragna, annars kan infästningar och träförband skadas.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Ytan är skyddad mot vattenstänk. Eventuell fukt eller utspillda vätskor ska torkas bort omedelbart med en torr bomullstrasa. Om fukt lämnas kvar kan träet svälla eller deformeras, vilket kan påverka både funktion och säkerhet. Om halkskyddsmattor används ska dessa tas bort regelbundet och torkas separat innan de åter placeras på sitsen. Om en fuktig matta lämnas kvar på sitsen kan träet svälla och tillverkarens garanti upphöra att gälla.
- Vid behov kan envis smuts avlägsnas med en lätt fuktad bomullstrasa och därefter torkas noggrant. Använd aldrig bensin, lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller klorbaserade rengöringsmedel.

MATERIAL

Ram och bakplatta:	massiv ek
Sitsribbor och pelotter:	massiv ek
Bakplatta och fotbrädor:	björkplywood
Basram:	björkplywood
Abduktionskil:	kork, klarlackad
Yta:	klarlackad - skyddad mot stänkvatten

Trä är en naturprodukt och ändrar färg med åren. Undvik stark och långvarig exponering för solljus, eftersom detta kan leda till en fläckig yta.



TILLVERKARE OCH KVALITET

TACK!

Tack för att du har valt vår produkt. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vid frågor om skräddarsydda produkter eller andra tillbehör är du välkommen att kontakta oss.

pappa  björn
UNIQUE CHAIRS FOR UNIQUE KIDS



Pappa Björn AB

Torsbo 307, 523 60 Gällstad

Org.Nr. 559544-0875, VAT-No. SE559544087501

info@pappa-bjoern.se

www.pappa-bjoern.se

Tel. +46 (0)76 874 36 33

